Experimentelle Übungen II

Versuchsprotokoll

 β -Spektrometer

Nils Kulawiak, Anthony Pietz, Oliver Brune

Gruppe D-01

 $n_kula01@uni-muenster.de$

a_piet09@uni-muenster.de

o_brun02@uni-muenster.de

17. Juni 2019

betreut von Alexander Fulst

Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung	1
2	The		1
	2.1	β -Zerfall	1
3	Tröp	ofchenmodell	2
4	Met	hoden	3
5	Ergebnis		5
	5.1	Entfernung des Untergrunds Z_0	5
	5.2	Kalibrierung	5
	5.3	Impulsauflösung	7
	5.4	Entfernung des Untergrunds Z_1	8
	5.5	Zusammenhang zwischen kinetischer Energie und Impuls	9
	5.6	Kurie	10
Lit	Literatur		

1 Einleitung

In diesem Versuch soll der β -Zerfall einer ¹³⁷Cs Quelle mit einem Spektrometer näher untersucht werden. Dabei ist das Ziel die Grenzenergie des häufigsten β -Zerfalls auf den angeregten Zustand von ¹³⁷Ba zu berechnen. Da das aufgenommen Spektrum allerdings aus verschiedenen Zerfällen besteht, die sich gegenseitig überlagern, müssen diese Zerfälle zuerst entfernt werden, damit nur noch der angesprochene β -Zerfall betrachtet werden kann. Danach wird dieser mit einem Kurie-Plot untersucht, um auf die Grenzenergie von $E_0 = (505 \pm 18)$ keV. Dieser Wert stimmt auch mit der Literaturwert von $E_0 = 513,97$ keV¹ überein.

2 Theorie

2.1 β -Zerfall

Der β -Zerfall liefert im Gegensatz zum α - und γ -Zerfall ein kontinuierliches Energiespektrum. Das warf Fragen auf, denn als Zerfallsprodukt konnte nur ein Elektron, bzw. ein Positron, detektiert werden. Dies erfüllte aber weder Energie- noch Impuls- und Drehimpulserhaltung. Abhilfe schaffte 1931 Wolfgang Pauli, indem er ein weiteres Teilchen postulierte, das Neutrino. Da dies einen halbzahligen Spin besitzt, war damit der Drehimpuls erhalten. Außerdem trägt es den fehlenden Teil der Energie und des Impulses. Außerdem trägt auch das Nukleon einen Teil des Impulses als Rückstoß. Dargestellt ist diese Impulsverteilung in $\ref{eq:continuity}$.

Es gibt drei verschiedene Arten des β -Zerfalls, die aber alle gemein haben, dass ein Nukleon umgewandelt wird. Beim β^- -Zerfall ((2.1)) wird ein Neutron zu einem Proton und erzeugt dabei außerdem ein Elektron und ein Elektron-Antineutrino. Beim β^+ -Zerfall ((2.2)) wird ein Proton zu einem Neutron unter Erzeugung eines Positrons und eines Elektron-Neutrinos. Der dritte Prozess ist der Elektroneneinfang, auch electron capture genannt ((2.3)). Hierbei muss sich ein Elektron sehr nah am Atomkern befinden, sodass es mit einem Proton zu einem Neutron und einem Elektron-Neutrino reagieren kann.

 $^{^{1}\}beta$ -Zerfall 137 Cs. eingesehen am 08.07.2019. URL: https://web.archive.org/web/20150522091637/http://ie.lbl.gov/toi/nuclide.asp?iZA=550137.

$$\beta^-: n \to p + e^- + \overline{\nu_e} \tag{2.1}$$

$$\beta^{+}: p \to n + e^{+} + \nu_{e}$$
 (2.2)

$$ec: p + e^- \to n + \nu_e \tag{2.3}$$

Da die Masse des Protons geringfügig kleiner ist als die des Neutrons, können sowohl β^- -Zerfalls als auch electron capture nicht an freien Protonen stattfinden, sondern nur im Atomkern. Der β^+ -Zerfalls dagegen ist auch an freien Neutronen möglich.

3 Tröpfchenmodell

Ob bei einem Kern ein β -Zerfall auftritt, hängt von der Energie und damit von der Masse des Kerns ab. Diese ist durch die Weizsäckersche Masseformel in (3.1) beschrieben, mit m_p der Masse eines Protons, m_n der Masse eines Neutrons und B der Bindungsenergie.

$$m(A,Z) = Zm_p + (A-Z)mn - B \tag{3.1}$$

Besonders interessant ist hier die Bindungsenergie. Sie wird durch das Tröpfchenmodell mithilfe der halbempirischen Bethe-Weizsäcker-Formel (siehe unten) bestimmt.

$$a_V A \qquad : \text{Volumenterm}$$

$$-a_S A^{2/3} \qquad : \text{Oberflächenterm}$$

$$-a_C Z^2 A^{2/3} \qquad : \text{Coulombterm}$$

$$-a_A \frac{(Z-N)^2}{4A} \qquad : \text{Asymetrieterm}$$

$$+ \begin{cases} +\delta & \text{für gg-Kerne} \\ 0 & \text{für ug- oder gu-Kerne} \\ -\delta & \text{für uu-Kerne} \end{cases} : \text{Paarterm}$$

Dabei wird der Atomkern ähnlich wie ein Wassertropfen betrachtet. Die Formel setzt sich aus fünf Termen zusammen:

- Der erste und größte Term ist der Volumenterm. Er ist proportional zum Radius des Kerns und beschreibt die "Kondensationsenergie" der Nukleonen. Aufgrund des Zusammenhangs $A^{1/3} \propto r_{\rm Kern}$, und da der Kern auf alle drei Raumdimensionen ausgedehnt ist, ist der Volumenterm linear von der Nukleonenzahl abhängig.
- Da die Nukleonen an der Oberfläche nur nicht so viele Bindungspartner haben wie die Nukleonen im Inneren des Kerns, verringert der Oberflächenterm die Bindungsenergie proportional zur Oberfläche des Kerns.
- Der Coulombterm berücksichtigt die positive Ladung der Protonen, die sich abstoßen. Daraus ergibt sich mit der Formel für die Coulomb-Energie einer geladenen Kugel $E \propto q^2/r = Z^2/A^{1/3}$
- Die Protonen und Neutronen sortieren sich im Kern unabhängig voneinander auf Energieniveaus, jeweils zwei Teilchen pro Niveau. Wenn also deutlich mehr Teilchen der einen Sorte im Kern vorhanden sind, müssen sich diese auf deutlich höheren Energieniveaus befinden als bei einer gleichen Verteilung zwischen Protonen und Neutronen. Dieser Umstand wird durch den Asymetrieterm in der Formel berücksichtigt.
- Da auf jedes Energieniveau jeweils zwei Teilchen passen, muss für ein weiteres Teilchen ein neues höheres Energieniveau besetzt werden. Daher haben Kerne, die aus einer geraden Anzahl an Protonen und Neutronen bestehen, eine höhere Bindungsenergie und sind somit energetisch günstiger als Kerne mit ungerader Anzahl an Protonen und Neutronen.

4 Methoden

Um ein β -Spektrum messen zu können werden die erzeugten Elektronen in einem Magnetfeld abgelenkt. Die Bahnkurve wird dabei durch Lorentz- und Zentripetalkraft gegeben. Im homogenen Magnetfeld ergibt sich mit m der relativistische Masse so:

$$Bev = \frac{mv^2}{\rho}. (4.1)$$

Die Teilchen beschreiben dabei eine kreisförmige Bahnkurve. Da der Impuls durch $p=eB\rho$ gegeben ist, sortiert das Spektrometer die Teilchen nach Impuls. Für die Messung mit dem Spektrometer sind zwei Größen wichtig: Die Impulsauflösung und die Transmission. Die Transmission ist ein Maß dafür, wie viele der von der Quelle emittierten Elektronen vom Detektor detektiert werden. Sie wird über

$$T = N(Det)/N(4\pi) \tag{4.2}$$

bestimmt. Sie steigt, je größer der Eintrittsspalt des Detektors ist. Die Impulsauflösung wird über die relative Linienbreite bestimmt. Diese ist konstant und wird auch Apparaturkonstante genannt. Sie wird mithilfe der Formel

$$R = \frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta(B\rho)}{B\rho} = \frac{\Delta\rho}{\rho} \tag{4.3}$$

berechnet. Die Impulsauflösung beträgt meist etwa 1%. Sie verschlechtert sich bei größerem Eintrittsspalt und verbessert sich bei kleinerem Eintrittsspalt. Die beiden Größen können also nicht gleichzeitig optimiert werden. Außerdem werden bei einem Spektrometer, dass die Elektronen nur in einer Ebene ablenkt, alle Elektronen nicht berücksichtigt, die nicht in dieser Ebene emittiert werden. Ein Spektrometer, der für diese Probleme eine Lösung anbietet, ist das im Versuch verwendete Toroid-Spektrometer. Der Aufbau dieses Spektrometers ist in ?? dargestellt.

Dabei liegen Quelle und Detektor in dieser Graphik genau hintereinander, der Detektor ist allerdings um 2ρ nach hinten verschoben. Die Elektronen werden von der Quelle emittiert und gelangen dann in das Magnetfeld, das von den Polschuhplatten erzeugt wird. Die Lorentzkraft lenkt die Elektronen dann auf den Detektor, wo diese gemessen werden können. Die Öffnungen, an denen Quelle und Detektor liegen, sind keilförmig. Das Magnetfeld, von dem die Elektronen abgelenkt werden, ist zylindersymmetrisch und besitzt nur eine Komponente in Φ-Richtung. In ?? ist das B-Feld als Draufsicht auf die r-Φ-Ebene gezeigt. Erkennbar ist, dass die Feldstärke bei größerem r abnimmt. Dies sorgt für die trochoide Bahn, die die Elektronen beschreiten.

Dadurch können nicht nur Elektronen aus einer Ebene detektiert werden, sondern auch solche, die in andere Raumrichtungen emittiert wurden. Das wird in ?? deutlich. Hier sind die Trochoiden deutlich erkennbar. Dies verbessert die Transmission deutlich,

während die Auflösung gleich bleibt.

Vom Detektor laufen sie gemäß ?? durch einige weitere Bauteile, bevor das Signal zur Auswertung bereit ist.

Zuerst wird das Elektron von einem Szintillator detektiert. Von dort wird es in einem Photomultiplier verstärkt. Dabei wird das Elektron auf eine Dynode beschleunigt, aus der es aufgrund der hohen kinetischen Energie mehrere Elektronen lösen kann. Diese werden nun auf weitere Dynoden gelenkt, sodass am Ende viele Elektronen zum Signal beitragen. Dieses wird am Vorverstärker weiter verstärkt, bevor es am Hauptverstärker in einen Rechteckpuls umgewandelt wird. Dieser erreicht schließlich den Zähler. Zur weiteren Verarbeitung wird ein selbsterstelltes Programm in der graphischen Programmiersprache LabView verwendet.

5 Ergebnis

5.1 Entfernung des Untergrunds Z_0

Zunächst soll die konstante Untergrundstrahlung entfernt werden. Diese entsteht in erster Linie über den γ -Zerfall der 137 Cs Quelle und da die Photonen nicht mit den elektromagnetischen Feld reagieren, sind sie konstant verteilt. Es wird also angenommen, dass dieser Untergrund mit einem linearen Fit mit y=mx+b bestimmt werden kann, wie es in Abb. 1 zu sehen ist. Für diesen Fit wurden speziell Messwerte aufgenommen, in denen sonst keine Strahlung erwartet wurde, womit sich die Messwerte $m=(27\pm63)\frac{1}{\text{mA}}$ und $b=9388\pm110$ ergeben. Die Steigung der linearen Gleichung hat dabei, wie erwartet, keine große Auswirkung.

Dieser Fit wird daraufhin von den restlichen Messwerten abgezogen, sodass sich ein neues Spektrum in Abb. 2 ergibt.

5.2 Kalibrierung

Als nächstes soll die Stromstärke in $B\rho$ umgewandelt werden, da dieser Wert multipliziert mit der Ladung e den Impuls ergibt. Dafür werden die K und L-Linien der Konversionselektronen im Spektrum mit den Literaturwerten verglichen.

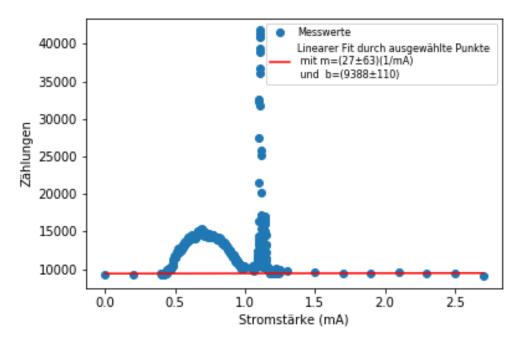


Abbildung 1: Fit der Untergrundstrahlung Z_0

Da die Peaks der L-Linien ineinander verschwimmen, wird dieser Peak gemittelt, womit sich die Literaturwerte von $B\rho_L=(0.3499\pm0.0001)$ Tcm und $B\rho_K=(0.338\,14\pm0.000\,05)$ Tcm ergeben. Die gemessenen Peaks in Abb. 3 hingegen liegen bei $I_L=(1.1408\pm0.0004)$ mA und $I_K=(1.1063\pm0.0002)$ mA. Es wird eine lineare Abhängigkeit zwischen der angelegten Stromstärke und dem $B\rho$ Wert angenommen, sodass die Umrechnungswerte $a=(0.342\pm0.006)\,\frac{\text{Tcm}}{\text{mA}}$ und $B\rho_0=(-0.040\pm0.007)$ Tcm folgen, wobei

$$a = \frac{\Delta B \rho [Tcm]}{\Delta I [Skt]} \tag{5.1}$$

und

$$(B\rho)_0 = (B\rho)_{kl} - a \cdot I_{kl} \tag{5.2}$$

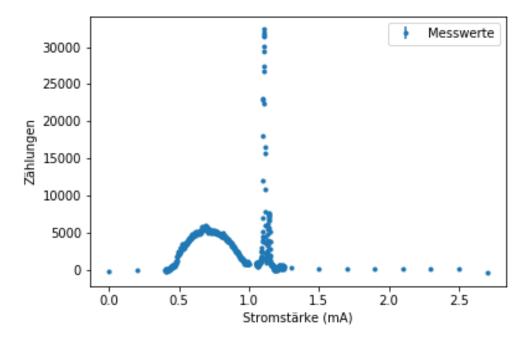


Abbildung 2: Messwerte nach Entfernung des Untergrund Z_0

5.3 Impulsauflösung

Die Impulsauflösung des Spektrometers ist gegeben mit

$$R = \frac{\Delta B \rho}{B \rho},\tag{5.3}$$

wobei $B\rho$: Peakposition der Linie; $\Delta B\rho$: Halbwertsbreite der Linie. Die Halbwertsbreite der Gauß Fits in Abb. 3 betragen $\Delta B\rho_K = (0.0129 \pm 0.0003)$ mA und $\Delta B\rho_L = (0.0176 \pm 0.0009)$ mA. Daraus ergeben sich zusammen mit den vorher genannten Peakpositionen die Impulsauflösung für die beiden Peaks mit $R_K = 0.0381 \pm 0.0014$ und $R_L = 0.050 \pm 0.003$. Allerdings sollte die Impulsauflösung eigentlich nicht mit dem Impuls selbst zusammenhängen. Die schlechtere Auflösung der L-Linie lässt sich jedoch dadurch erklären, dass es drei Peaks sind, die allerdings nicht voneinander unterscheidbar sind. Dadurch wird auch die Halbwertsbreite breiter, was die Auflösung verschlechtert.

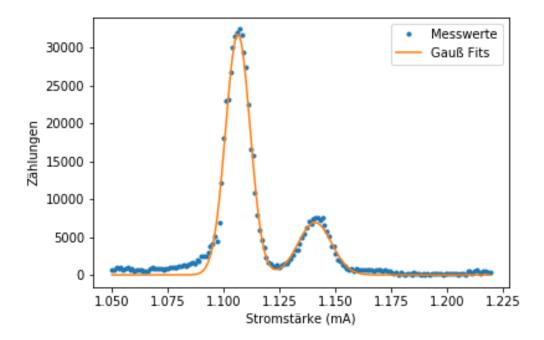


Abbildung 3: Kalibrierung der Stromstärke zu $B\rho$

5.4 Entfernung des Untergrunds Z_1

Daraufhin muss der β -Zerfall, der direkt in den Grundzustand zerfällt, entfernt werden. Da das Ziel ist das Ende des β -Zerfalls in den angeregten Zustand herausgefunden werden soll, muss in diesem Fall nur der Zerfall unter eben diesem β -Peak entfernt werden. Dafür kann wieder eine lineare Näherung gemacht werden, wobei als Startpunkt ein Punkt ausgewählt wird, der ungefähr bei null liegt und als Endpunkt einer, zwischen dem Start des β -Zerfalls in den angeregten Zustand und der K-Linie der Konversionselektronen.

In diesem Fall wurde beim Startpunkt über einige in Frage kommende Punkte gemittelt, wodurch sich der Startwert zu $I=(0,426\pm0,004)\,\mathrm{mA}$ und Zählungen $N=39\pm113$. Der Bestimmung des Endpunkts hat sich allerdings schwieriger dargestellt, da nicht viele Messwerte zwischen den beiden Peaks aufgenommen wurden. Daraus ergibt sich auch die entsprechend große Unsicherheit vom Endpunkt mit $I=(1,05\pm0,20)\,\mathrm{mA}$ und $N=834,8600\pm128,7179$. Der lineare Fit ist in Abb. 4 zu sehen.

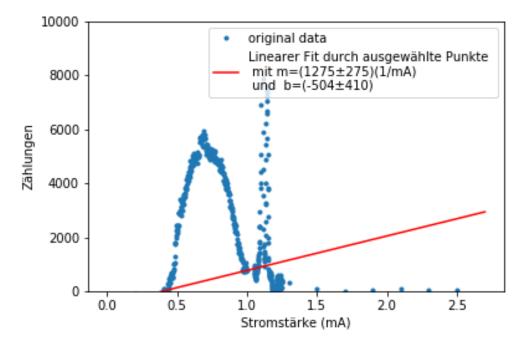


Abbildung 4: Messwerte nach Entfernung des Untergrund Z_0

5.5 Zusammenhang zwischen kinetischer Energie und Impuls

Um die gemessenen Impulse $p=B\rho e$ mit einer kinetischen Energie zu vergleichen muss diese vorher umgerechnet werden. Dazu wird die relativistische Gesamtenergie

$$W^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^{<4} (5.4)$$

und

$$W = E_{Kin} + m_0 c^2 (5.5)$$

gleichgesetzt. Wenn das nach E_{Kin} umgeformt folgt daraus

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} - m_0c^2 = \sqrt{e^2c^2(B\rho)^2 + m_0^2c^4} - m_0c^2.$$
 (5.6)

5.6 Kurie

Als letztes soll die Grenzenergie E_0 bestimmt werden. Dafür wird zunächst auf die y-Achse $K=\sqrt{(\frac{N}{p^2F})}$ aufgetragen mit

$$F = \frac{2\pi\mu}{1 - e^{-2\pi\mu}} \tag{5.7}$$

und

$$\mu = \frac{Z\alpha c}{v},\tag{5.8}$$

mit Z der Kernladungszahl, $\alpha = \frac{1}{137}$ und v der Geschwindigkeit des emittierten Elektrons. Die Geschwindigkeit v lässt sich dabei mit $v = \frac{p}{m}$ berechnen.

Auf der x-Achse wird die vorher berechnete kinetische Energie aufgetragen.

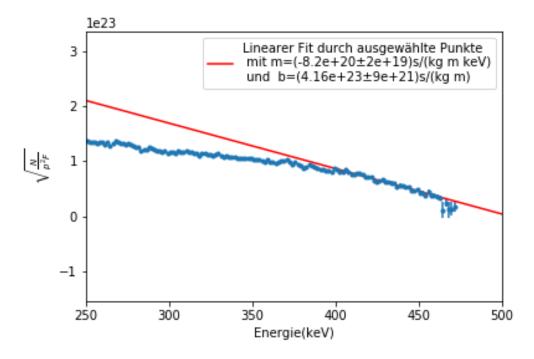


Abbildung 5: Messwerte nach Entfernung des Untergrund Z_0

Mit dem linearen Fit in Abb. 5 kann dann die Grenzenergie E_0 berechnet werden. Dafür muss die linearer Gleichung gleich null gesetzt werden, woraus die Grenzenergie $E_0 = (505 \pm 18)$ keV folgt. Somit ist das Ziel die Unsicherheit von E_0 unter 10% zu halten erfolgreich gewesen. Außerdem stimmt der errechnete Wert auch mit dem Literaturwert

von $E_0 = 513,97 \,\mathrm{keV^2}$ überein.

 $^{^2\}beta$ -Zerfall 137 Cs.

Literatur

bereitgestellte Anleitung β -Zerfall. Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Kern Physik.

 $\beta\text{-}Zerfall~^{137}Cs.~eingesehen~am~08.07.2019.~URL:~https://web.archive.org/web/20150522091637/http://ie.lbl.gov/toi/nuclide.asp?iZA=550137.$